

FICHA TÉCNICA

SILICONA DE ADICIÓN PUTTY SOFT FAST SET PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERENCIA	15157	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Polivinilsiloxano de alta viscosidad, recomendado para la técnica en dos fases (doble impresión) en combinación con los fluidos Proclinic Regular Body, Proclinic Light Body o Proclinic Ultra Light Body o la técnica en un único paso (simultánea) en combinación con los fluidos Proclinic Light Body o Proclinic Ultra Light Body.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Azul Color catalizador: Azul Claro Tiempo de trabajo: 1'30" Tiempo en boca: 2'30" Tiempo total: 4'	
COMPOSICIÓN	Polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, rellenos de sílice, metilhidrogensiloxano, hidrocarburos, pigmentos, relleno de aluminio inorgánico, aditivos, complejo organoplatínico.	
ENVASE	2 u. x 380 ml cartuchos 2 capuchas de puntas. 15 puntas de mezcla.	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Uso dental. Realizar impresiones dentales de precisión con una consistencia final elástica.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material. En personas sensibles a los Polivinilsiloxanos, éstos pueden provocar irritaciones u otras reacciones alérgicas.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5ºC y 27ºC. Conservar en lugar seco, alejado de la luz solar directa.	

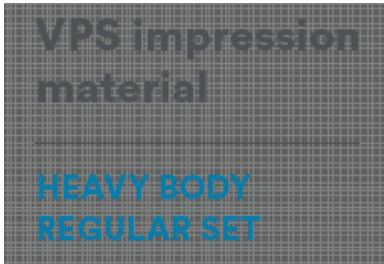
TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC EXPERT PUTTY SOFT FAST SET ADDITION SILICONE, 380 ml			
REFERENCE	15157		
MANUFACTURER	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy		
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.		
DESCRIPTION	High viscosity vinyl polysiloxane, recommended for the two-phase (double impression) technique in combination with Proclinic Regular Body, Proclinic Light Body or Proclinic Ultra-Light Body fluids or the one step (simultaneous) technique in combination with Proclinic Light Body or Proclinic Ultra-Light Body fluids.		
SPECIFICATIONS	Base colour: blue Catalyst colour: light blue Working time 1' 30'' Setting time 2'30'' Total working time 4'		
COMPOSITION	Vinyl polysiloxane, polydimethylsiloxane, Silica fillers, Methylhydrogenosiloxane, Hydrocarbons, Pigments, Inorganic aluminium fillers, additives, Organoplatinum complex.		
PACKAGING	2 x 380 ml cartridges 2 mixing tip lockers 15 dynamic-static mixing tips		
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture.		
INTENDED USE	Dental use. For precision dental impressions with elastic final consistency.		
SAFETY INFORMATION	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material. In sensitive subjects, vinyl polysiloxanes may cause irritation or other allergic reactions.		
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5°C and 27°C. Store in a cool dry place, away from direct sunlight.		

FICHA TÉCNICA

SILICONE DE ADIÇÃO PUTTY SOFT FAST SET PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERÊNCIA	15157	
FABRICANTE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo médico de classe IIa, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.	
DESCRIÇÃO	Polivinilsiloxano de alta viscosidade, recomendado para a técnica de duas etapas (moldagem dupla) em combinação com os fluidos Proclinic Regular Body, Proclinic Light Body ou Proclinic Ultra Light Body ou para a técnica de uma etapa (simultânea) em combinação com os fluidos Proclinic Light Body ou Proclinic Ultra Light Body.	
COMPOSIÇÃO	Polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, cargas de sílica, metil-hidrogensiloxano, hidrocarbonetos, pigmentos, carga inorgânica de alumínio, aditivos, complexo de organoplatina.	
ESPECIFICAÇÕES	Base: cor azul Catalisador: cor azul clara Tempo de trabalho: 1'30" Tempo na boca: 2'30" Tempo total: 4'	
EMBALAGEM	2 u. x 50 ml cartuchos 2 tampas de pontas 15 pontas de mistura	
VALIDADE	36 meses a partir da data de fabricação.	
FINALIDADE	Uso dentário. Polivinilsiloxano para primeiras impressões com consistência final elástica.	
INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA	Evitar o contato direto da luva de látex. O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes no caso de uso de luvas de látex. Em indivíduos sensíveis os polivinilsiloxanos podem provocar irritações ou outras reações alérgicas.	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Armazenar em local fresco e seco entre 5° e 27°C. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.	

FICHA TÉCNICA

SILICONA DE ADICIÓN HEAVY BODY REGULAR SET PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERENCIA	15158	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Polivinilsiloxano de media viscosidad, recomendado para la técnica monofase (simultánea) en combinación con Proclinic Putty Soft, Proclinic Putty Hard o Proclinic Putty.	
ESPECIFICACIONES	Color Base: Azul Color catalizador: Blanco Tiempo de trabajo: 2' Tiempo en boca: 3'30" Tiempo total: 5'30"	
COMPOSICIÓN	Polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, rellenos de sílice, metilhidrogensiloxano, tensioactivos, pigmentos, relleno de aluminio inorgánico, complejo organoplatínico.	
ENVASE	2 u. x 380 ml cartuchos 2 capuchas de puntas 15 puntas de mezcla	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación	
FINALIDAD	Uso dental. Realizar impresiones dentales de precisión.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material. En personas sensibles a los Polivinilsiloxanos, éstos pueden provocar irritaciones u otras reacciones alérgicas.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco, alejado de la luz solar directa.	

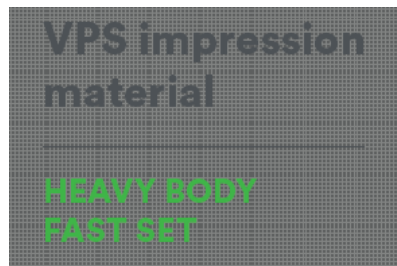
TECHNICAL DATA SHEET

HEAVY BODY REGULAR SET ADDITION SILICONE PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERENCE	15158	
MANUFACTURER	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	Medium viscosity vinyl polysiloxane, recommended for the monophase (simultaneous) technique in combination with Proclinic Putty Soft, Proclinic Putty Hard or Proclinic Putty.	
SPECIFICATIONS	Base colour: blue Catalyst colour: white Working time: 2' Setting time: 3'30'' Total working time: 5'30''	
COMPOSITION	Vinyl polysiloxane, polydimethylsiloxane, Silica fillers, Methylhydrogenosiloxane, Surfactant, Pigments, Inorganic aluminium fillers, Organoplatinum complex.	
PACKAGING	2 x 380 ml cartridges 2 mixing tip lockers 15 dynamic-static mixing tips	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture.	
INTENDED USE	Dental use. For precision dental impressions.	
SAFETY INFORMATION	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material. In sensitive subjects, vinyl polysiloxanes may cause irritation or other allergic reactions.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5°C and 27°C. Store in a cool dry place, away from direct sunlight.	

FICHA TÉCNICA

SILICONE DE ADIÇÃO HEAVY BODY REGULAR SET PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERÊNCIA	15158	
FABRICANTE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo médico de classe IIa, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.	
DESCRIÇÃO	Polisiloxano vinílico de viscosidade média, recomendado para a técnica monofásica (simultânea) em combinação com Proclinic Putty Soft, Proclinic Putty Hard ou Proclinic Putty.	
COMPOSIÇÃO	Vinil polissiloxano, polidimetilsiloxano, cargas de sílica, metil-hidrogenossiloxano, tensoativo, pigmentos, cargas inorgânicas de alumínio, complexo de organoplatina.	
ESPECIFICAÇÕES	Base: cor azul Catalisador: cor branca Tempo de trabalho: 2' Tempo na boca: 3'30'' Tempo total: 5'30''	
EMBALAGEM	2 u. x 380 ml cartuchos 2 tampas de pontas 15 pontas de mistura	
VALIDADE	36 meses a partir da data de fabricação.	
FINALIDADE	Uso dentário. Polivinilsiloxano para primeiras impressões com consistência final alta.	
INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA	Evitar o contato direto da luva de látex. O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes no caso de uso de luvas de látex. Em indivíduos sensíveis os polivinilsiloxanos podem provocar irritações ou outras reações alérgicas.	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Armazenar em local fresco e seco entre 5° e 27°C. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.	

FICHA TÉCNICA

SILICONA DE ADICIÓN HEAVY BODY FAST SET PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERENCIA	15159	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase IIa, según el Reglamento (UE) 2017/745.	
DESCRIPCIÓN	Polivinilsiloxano de alta viscosidad, recomendado para la técnica monofase (simultánea) en combinación con Proclinic Putty Soft, Proclinic Putty Hard o Proclinic Putty.	
ESPECIFICACIONES	Color base: verde Color catalizador: blanco Tiempo de trabajo 1'30" Tiempo en boca 2'30" Tiempo total 4'	
COMPOSICIÓN	Polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, rellenos de sílice, metilhidrogensiloxano, tensioactivos, pigmentos, relleno de aluminio inorgánico, complejo organoplatínico.	
ENVASE	2 u. x 380 ml cartuchos 2 capuchas de puntas 15 puntas de mezcla	
VIDA ÚTIL	3 años a partir de la fecha de fabricación.	
FINALIDAD PREVISTA	Uso dental. Realizar impresiones dentales de precisión con consistencia dura.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	No use guantes de látex. El uso de guantes de látex puede perturbar la reacción de adición, se aconseja el lavado cuidadoso de las manos antes de manipular el material. En personas sensibles a los Polivinilsiloxanos, éstos pueden provocar irritaciones u otras reacciones alérgicas.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Conservar entre 5°C y 27°C. Conservar en lugar seco, alejado de la luz solar directa.	

TECHNICAL DATA SHEET

PROCLINIC EXPERT HEAVY BODY FAST SET ADDITION SILICONE, 380 ml		
REFERENCE	15159	
MANUFACTURER	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASSIFICATION	Class IIa Medical Device, according to Regulation (EU) 2017/745.	
DESCRIPTION	High viscosity vinyl polysiloxane, recommended for the monophasic (simultaneous) technique in combination with Proclenic Putty Soft, Proclenic Putty Hard or Proclenic Putty.	
SPECIFICATIONS	Base colour: green Catalyst colour: white Working time: 1'30'' Setting time: 2'30'' Total working time: 4'	
COMPOSITION	Vinyl polysiloxane, polydimethylsiloxane, Silica fillers, Methylhydrogenosiloxane, Surfactant, Pigments, Inorganic aluminium fillers, Organoplatinum complex.	
PACKAGING	2 x 380 ml cartridges 2 mixing tip lockers 15 dynamic-static mixing tips	
SHELF LIFE	3 years from the date of manufacture.	
INTENDED USE	Dental use. For precision dental impressions.	
SAFETY INFORMATION	Do not use latex gloves. The use of latex gloves may disrupt the addition reaction. It is advised a careful hand washing before handling the material. In sensitive subjects, vinyl polysiloxanes may cause irritation or other allergic reactions.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store between 5°C and 27°C. Store in a cool dry place, away from direct sunlight.	

FICHA TÉCNICA

SILICONE DE ADIÇÃO HEAVY BODY FAST SET PROCLINIC EXPERT, 380 ml		
REFERÊNCIA	15159	
FABRICANTE	ZHERMACK S.p.A via Bovazecchino 100 45021 Badia Polesine (RO), Italy	
CLASSIFICAÇÃO	Dispositivo médico de classe IIa, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745.	
DESCRIÇÃO	Polivinilsiloxano de alta viscosidade, recomendado para a técnica monofásica (simultânea) em combinação com Proclinic Putty Soft, Proclinic Putty Hard ou Proclinic Putty.	
ESPECIFICAÇÕES	Base: cor verde Catalisador: cor branca Tempo de trabalho: 1'30" Tempo na boca: 2'30" Tempo total: 4'	
COMPOSIÇÃO	Polivinilsiloxano, polidimetilsiloxano, cargas de sílica, metil-hidrogenossiloxano, tensoactivos, pigmentos, carga inorgânica de alumínio, complexo de organoplatina.	
EMBALAGEM	2 u. x 380 ml cartuchos 2 tampas de pontas 15 pontas de mistura	
VALIDADE	36 meses a partir da data de fabricação.	
FINALIDADE	Uso dentário. Polivinilsiloxano para primeiras impressões com consistência final alta.	
INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA	Evitar o contato direto da luva de látex. O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de látex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das mãos para eliminar todos os vestígios poluentes no caso de uso de luvas de látex. Em indivíduos sensíveis os polivinilsiloxanos podem provocar irritações ou outras reações alérgicas.	
ALMAZENAMENTO E TRANSPORTE	Armazenar em local fresco e seco entre 5° e 27°C. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade.	